



twion[®]
ENERGIZE YOUR WHEELCHAIR

alber[®]

Einfach mobil.

MADE IN GERMANY 





GRENZEN ERWEITERN.

Für den modernen Menschen zählt vor allem eines: Mobilität. Deswegen brauchen wir Fortbewegungsmittel, die an unseren dynamischen Lebensstil angepasst sind: effizient, smart und mit jeder Menge Fahrspaß.

Die innovative Antriebstechnik von Alber bietet die effiziente und flexible Lösung für die Mobilität der Zukunft.

Mit dem neuen Aktivantrieb twion erschließen Sie sich neue Lebensräume und größte Unabhängigkeit. Die mit modernster Digitalelektronik ausgestatteten Elektromotoren, geben Ihnen Extra-Power bei jeder Anschubbewegung. Der am Greifreifen angeordnete Sensor ermittelt präzise die richtige Dosis an Unterstützung.

Der lautlose Direktantrieb sorgt dabei für hohe Agilität und leichtes Handling. So sind Sie aktiv in Bewegung und kommen schnell, effizient und entspannt an Ihr Ziel.



GESCHWINDIGKEIT SPÜREN.

Schneller und weiter: Die dynamischen Motoren beschleunigen den Rollstuhl bis auf 6 km/h (optional 10 km/h*). So macht man richtig Strecke mit hohem Fahrspaß. Die effiziente Energierückgewinnung speist im Bremsvorgang Energie in die Batterien zurück – das bedeutet bis zu 10 % Reichweitenausdehnung für mehr Freiraum.

* Mit Mobility Plus Paket. Länderspezifische Straßenverkehrsgesetze sind zu beachten.

SELBSTSTÄNDIGKEIT LEBEN.

Das Auto spielt eine zentrale Rolle in unserer mobilen Welt und ist zum unverzichtbaren Begleiter geworden. Die durchdachte twion Technik erlaubt eine optimale Kombination von Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln bei maximaler Flexibilität. Per Knopfdruck lassen sich die Räder bequem abnehmen und platzsparend verladen. Bei der Auswahl der Materialien wurde im besonderen Maße auf das Gewicht geachtet. So kommen hochfeste Aluminiumlegierungen, Hightech-Kunststoffe und die neuste digitale Motorentechnologie zum Einsatz.

Das Ergebnis: Mit 6 kg* inkl. Batterie sind die Räder ein Leichtgewicht.

* Abhängig von der Ausstattungsvariante.



INTELLIGENT VERBUNDEN.

Smartphones haben sich als Kommunikations- und Organisationszentrale in unserer modernen Gesellschaft fest etabliert.

Umso konsequenter ist es, dass Alber seinen Service auch digital anbietet. Einfach kostenlos im Google Playstore die twion Mobility App auf alle android-fähigen Smartphones herunterladen und den Rund-um-Service jederzeit nutzen. Zum Beispiel kann so im Servicefall die Diagnosefunktion helfen, den Fehler in den Rädern zu lokalisieren und bei Bedarf direkt den Kontakt zu unserem Service Team herzustellen.

Mit dem optional erhältlichen Mobility Plus Paket können Sie noch mehr Features in der twion App nutzen und über das Smartphone direkt mit den twion Rädern kommunizieren. So bekommen Sie auch unterwegs alle wichtigen Fahrinformationen wie zurückgelegte Strecken, Ladezustand der Batterien oder verbrauchte Kalorien angezeigt. Wer es sportlicher mag, kann das Fahrprofil seinen individuellen Anforderungen anpassen oder Touren über GPS aufzeichnen und abspeichern.

Das Mobility Plus Paket ist im Fachhandel erhältlich.



Google play


Die twion APP: erhältlich im Google Playstore.



WELTNEUHEIT BLUEDRIVE.

Die innovative BlueDrive-Funktion ermöglicht, den mit twion Antriebsrädern ausgestatteten Rollstuhl über das Smartphone fernzusteuern.* Die integrierten Neigungssensoren sorgen dafür, dass ein leichtes Kippen des Smartphones in die gewünschte Fahrtrichtung den Rollstuhl in Bewegung setzt. Alternativ steht zur Steuerung ein virtueller Joystick zur Verfügung.

* Aus Sicherheitsgründen darf die BlueDrive-Funktion nur ohne Rollstuhlsassen zur freien Rollstuhlpositionierung benutzt werden.

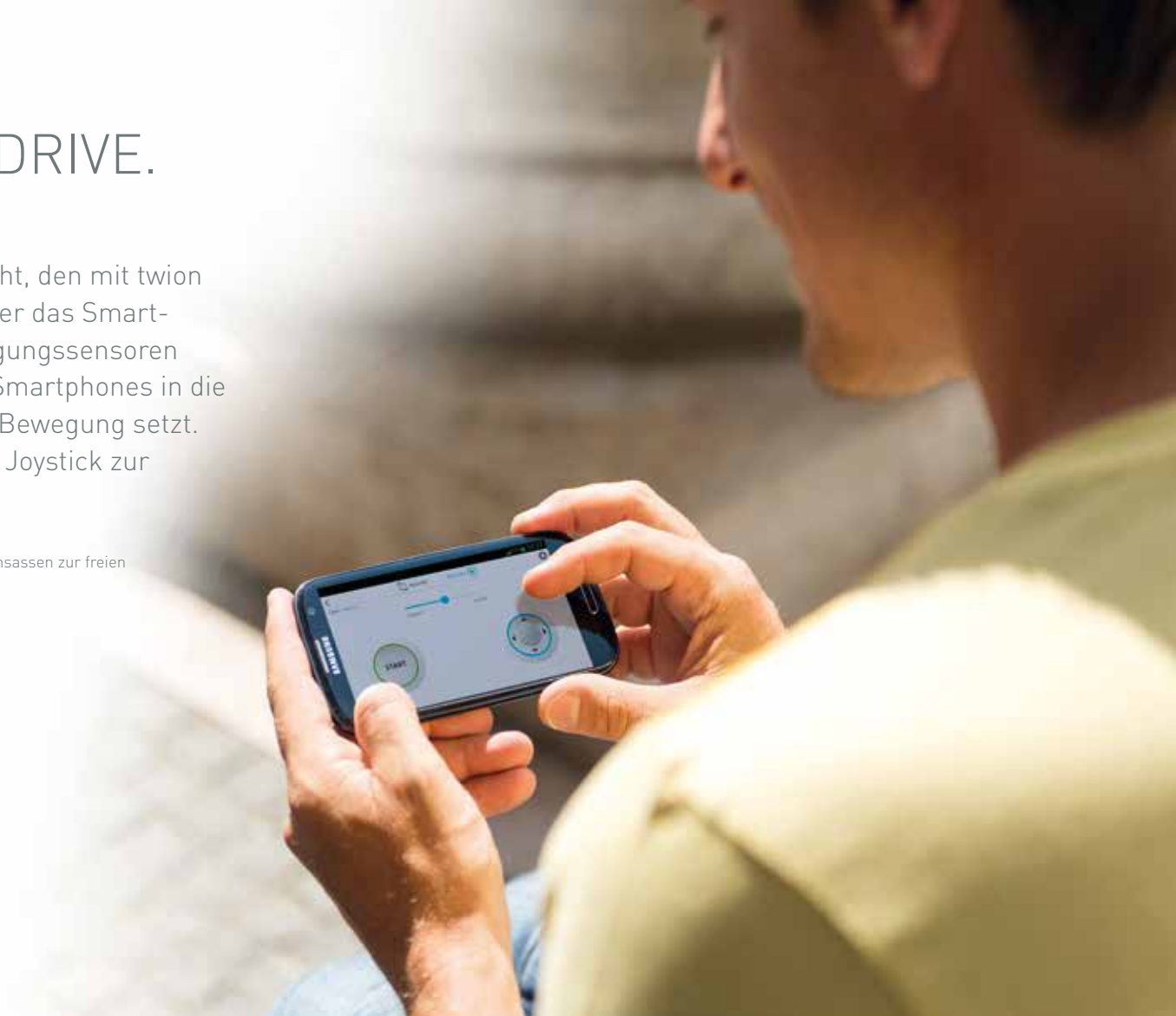

Die Funktionen des Mobility-Plus-Pakets:



Für Android-Smartphones



BlueDrive Fernsteuerung



Fahrinformationen



Allgemeine Einstellungen



Fahrkonfiguration



Ruhe-Modus



Tour-Modus



Alber Service



Auf einen Blick

Gewicht pro Rad: ab 6,0 kg

Geschwindigkeit: bis 6 km/h (optional 10 km/h mit Mobility Plus Paket)

Reichweite: 12–20 km

Connectivity: Bluetooth (Android-Smartphones)

Batterietechnik: wartungsfreie Lithium-Ionen-Zellen, 36 Monate Garantie*

Technologien: BlueDrive, EasyConnex, Energierückgewinnung

* Optional



DESIGN ERLEBEN.

Exklusiv, schlicht und formvollendet. Das Design des twion zieht den Betrachter mit jedem Detail in seinen Bann. Ein Spiel aus fließenden Übergängen und markanten Farbkombinationen. Hochwertig verarbeitet und dabei ebenso intuitiv wie komfortabel. Alber stellt höchste Ansprüche an die Qualität der eingesetzten Materialien und die Ausführung.

Zudem bietet Alber zwei Farbvarianten und verschiedene Bereifungen an, damit keine Designwünsche offenbleiben.



ELEKTRISIEREND.

Ganz neu ist auch der Einsatz des innovativen EasyConnex Ladesteckers. Mit Magnetkraft findet dieser automatisch die richtige Steckposition. Die Ladebuchse am Rad dient gleichzeitig als Ein-/Aus Schalter – integrierte Multifunktionalität in Perfektion.

5 LEDs zeigen den Batterieladezustand an. Bereits nach rund 4 Stunden Ladezeit stehen Ihnen wieder mindestens 80% der Kapazität zur Verfügung.

FLEXIBEL BLEIBEN.

twion passt an fast jeden handelsüblichen Aktivrollstuhl. Damit kann der bereits vorhandene und individuell angepasste Rollstuhl in aller Regel weiterhin genutzt werden. Möglich macht dies eine kleine und gewichtsoptimierte Halterung, die einmalig am Rollstuhlrahmen montiert wird.

Mit dem komfortablen Steckachsensystem können sowohl die manuellen Räder als auch die twion Räder wechselseitig flexibel genutzt werden. Auf diese Weise steht jederzeit die gewünschte Antriebsart zur Verfügung: manuell oder mit E-Power!



twion[®]
ENERGIZE YOUR WHEELCHAIR



Alber GmbH
Vor dem Weißen Stein 21
72461 Albstadt
Telefon 0800 1224567
Telefax 07432 2006-299
endkundenbetreuung@alber.de
www.alber.de



QR-Code scannen und weitere
Informationen erhalten.