

Q50 R carbon

Leichter reisen mit dem 14,5 kg faltbaren
Carbon-Elektrollstuhl



ZUGELASSEN FÜR FLUGREISEN*



LANGSTRECKENFLÜGE. FAMILIENAUSFLÜGE. TAGESSTRECKEN.

Wo auch immer Ihr Ziel ist, der **Q50 R Carbon** ist Ihr perfekter Reisebegleiter. Mit einem Gewicht von nur **14,5 kg** (ohne Akku) und aus hochwertigem Carbon gefertigt, können Sie beruhigt (und ohne Schmerzen in den Armen) losfahren und Ihren Elektrorollstuhl mühelos anheben. Er lässt sich in Sekundenschnelle falten und auf engstem Raum verstauen – und das alles, ohne den Akku entnehmen zu müssen.

Ausserdem bringt er Sie mit der bewährten QUICKIE-Leistung von A nach B (oder sogar von A nach Z bis zu einer **Reichweite von 24 km** – dank Zusatzakku). Und mit 5 beeindruckenden Akzentfarben können Sie überall, wo Sie hinfahren, einen Hauch von Stil verbreiten.



Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones, um das Video anzusehen.

* Einzelne Fluggesellschaften haben unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf den Transport von Produkten mit Li-Ion-Batterien. Bevor Sie eine Flugreise mit dem Rollstuhl buchen, vergewissern Sie sich bitte bei Ihrer Fluggesellschaft, dass Sie batteriebetriebene Fahrzeuge unter folgenden Bedingungen akzeptiert: UN-Klassifizierung UN3171. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.



DESIGN

CARBON. LEICHT, ABER UNGLAUBLICH STARK.

Einige der leichtesten Produkte auf der Welt sind aus Carbon, darunter auch der Q50 R Carbon. Sein Gewicht von nur 14,5 kg ist absolut beeindruckend. Sein Carbon-Rahmen bietet auf unebenen Strassen einzigartige stossdämpfende Eigenschaften, die für eines der sanftesten und effizientesten Fahrerlebnisse überhaupt sorgen.

136 KG

MAXIMALE ZULADUNG

Der Q50 R Carbon wiegt nicht nur weniger dank seiner unglaublich stabilen Kohlefaserkonstruktion, sondern erlaubt auch eine maximale Zuladung von bis zu **136 kg!**



REISEN

BRINGT SIE AN ORTE, DIE ANDERE NICHT ERREICHEN KÖNNEN.

Der Q50 R Carbon lässt sich so kompakt falten, dass er fast überall hinpasst! Nehmen Sie den Zug, steigen Sie in ein Flugzeug oder verstauen Sie ihn im Kofferraum des kleinsten Autos – er ist perfekt, um Orte in der Nähe oder in der Ferne zu erkunden. Unglaublich leicht, lässt er sich mühelos ein- und ausladen.



MÜHELOSES FALTEN

Es gibt keine komplizierten Mechanismen – einfach (1) den Clip an der Rückseite hochklappen und (2) die Rückenlehne nach unten drücken, um den Q50 R Carbon zu falten. Sie müssen nicht einmal den Akku herausnehmen. **So einfach geht das!**



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone und buchen Sie Ihre kostenlose Probefahrt.



370 mm
LÄNGE (GEFALTET)

767 mm
HÖHE (GEFALTET)



TRANSPORTGURT INKLUSIVE

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Transportgurt bleibt Ihr Q50 R Carbon beim Anheben zuverlässig gefaltet.



BEQUEMES AUFLADEN DES LITHIUM-IONEN-AKKUS

Der Akku muss nicht an den Q50 R Carbon angeschlossen sein, um ihn zu laden. Sie können den nur **1,4 kg** leichten Akku herausnehmen und separat aufladen.

ALTERNATIVE MOBILITÄT


BIS ZU 24 KM REICHWEITE.

Lassen Sie Ihr Auto zu Hause und genießen Sie eine Reichweite von bis zu 12 km mit dem 10 Ah Lithium-Ionen-Akku. Möchten Sie weitere Stecken zurücklegen? Mit dem zusätzlichen Akkufach können Sie (optional) einen zweiten Akku für die Fahrt mitnehmen und so die Reichweite auf bis zu 24 km verdoppeln!



LADUNG AUCH IM GEFALTETEN ZUSTAND

Da Sie den Akku beim Falten des Q50 R Carbon nicht rausnehmen müssen, kann er auch bequem über die Ladebuchse am Bedienelement aufgeladen werden.

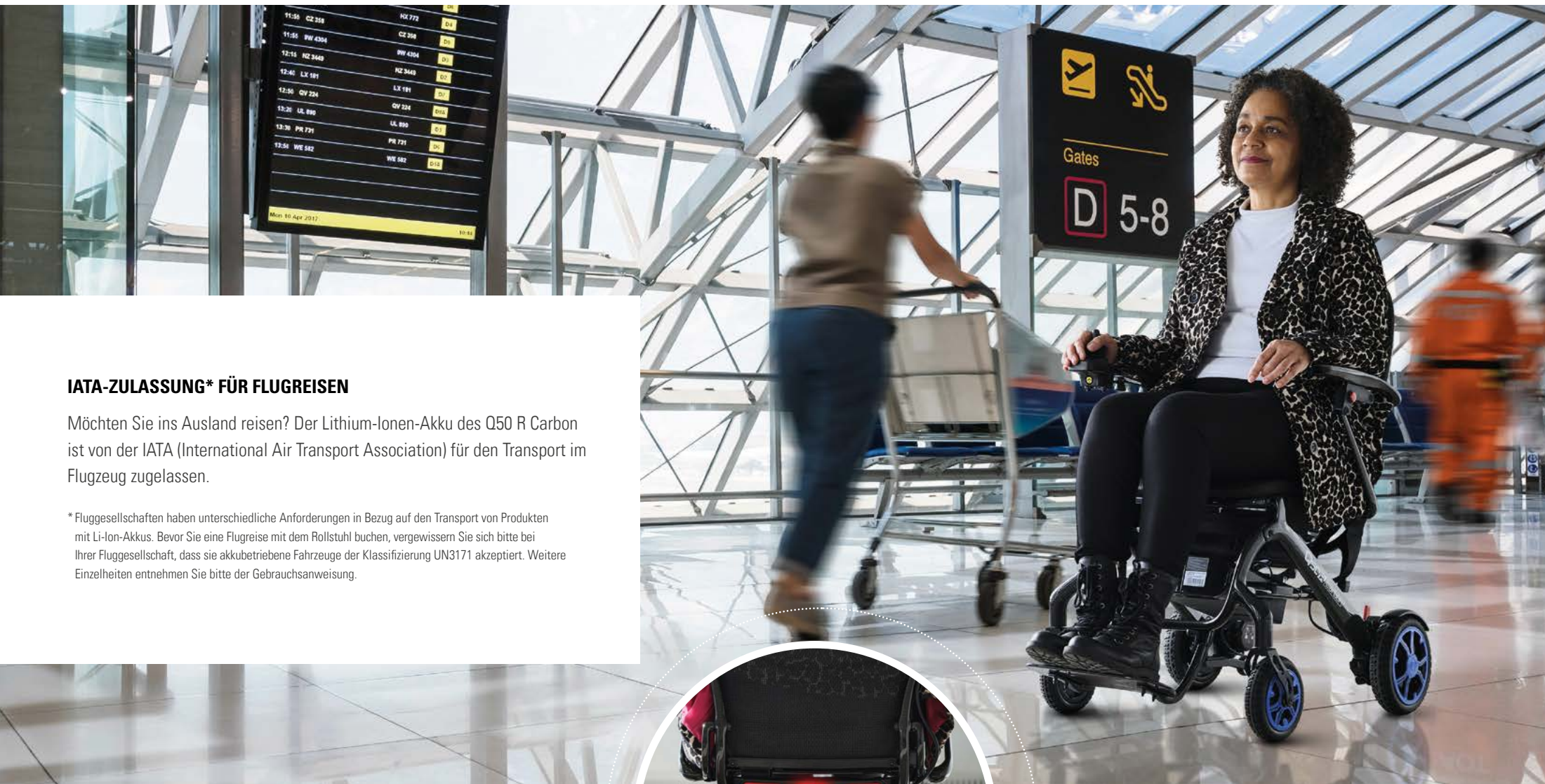

IATA-ZULASSUNG* FÜR FLUGREISEN

Möchten Sie ins Ausland reisen? Der Lithium-Ionen-Akku des Q50 R Carbon ist von der IATA (International Air Transport Association) für den Transport im Flugzeug zugelassen.

*Fluggesellschaften haben unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf den Transport von Produkten mit Li-Ion-Akkus. Bevor Sie eine Flugreise mit dem Rollstuhl buchen, vergewissern Sie sich bitte bei Ihrer Fluggesellschaft, dass sie akkubetriebene Fahrzeuge der Klassifizierung UN3171 akzeptiert. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.



TAGESFAHR-RÜCKLICHT

Mit diesem superhellen Rücklicht werden Sie bei Tag und Nacht gesehen. Es wird immer dann aktiviert, wenn Ihr Q50 R Carbon in Bewegung ist. Es erhöht Ihre Sichtbarkeit und die Aufmerksamkeit anderer in Ihrer Umgebung.



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone und downloaden Sie das IATA-Zertifikat.

PERFORMANCE

KOMPAKT UND WENDIG.

Der Q50 R Carbon ist jeder Situation gewachsen. Ob in einem engen Hausflur, einem belebten Einkaufszentrum oder in öffentlichen Verkehrsmitteln: Der Q50 R Carbon hat die nötige Kraft und die kompakten Masse, um den Alltag zu meistern.

1600 mm

WENDEKREIS

Im Gegensatz zu einem Elektromobil hat der Q50 R Carbon einen kleinen Wendekreis von 1600 mm, was ihn ideal für Innenräume macht. Wenden Sie mühelos in engen Gängen, Küchen und anderen beengten Räumen.




570 mm

SCHMAL

Machen Sie sich keine Sorgen, dass Sie zu Hause mit dem Q50 R Carbon an Gegenstände anstossen – dank seiner geringen Breite von 570 mm passt er problemlos durch schmale Türen und enge Räume.

MACHEN SIE ES SICH BEQUEM

Die ultraleichte Rückenlehne sorgt nicht nur für Bequemlichkeit, ihr atmungsaktiver Rückenbezug lässt Körperwärme durch, damit Ihr Rücken kühl und trocken bleibt. Das standardmässige, **30 mm** dicke Schaumstoffkissen sorgt auch auf längeren Fahrten für Komfort.

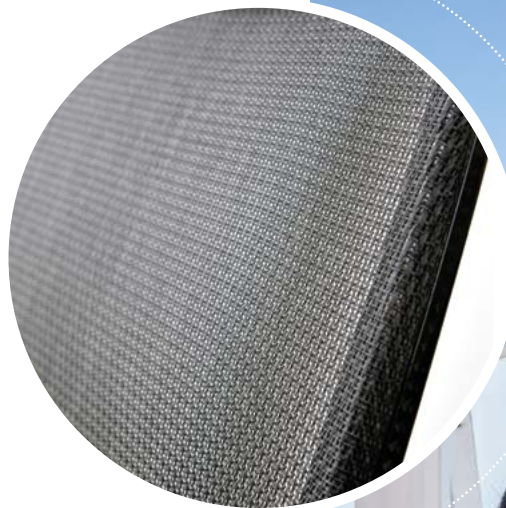

EINFACHER TRANSFER

Bequemer seitlicher Ein- und Ausstieg aus Ihrem Q50 R Carbon indem Sie die Armlehnen nach oben klappen. Sie bevorzugen den Transfer im Stehen? Die zentral montierte Fussstütze lässt sich bequem nach oben klappen, damit Sie den nötigen Platz haben.



ZUVERLÄSSIGKEIT

GERINGES GEWICHT, HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT.

Seit über 40 Jahren arbeiten wir mit Weltklasse-Zulieferanten im Bereich von elektronischen Komponenten zusammen, um solid gebaute Elektrorollstühle zu liefern, die die besten Fahrleistungen, Motoren und Reichweiten aufweisen sowie eine Zuverlässigkeit, die andere nicht bieten können.

NVR2-STEUERUNG FÜR BÜRSTENLOSE MOTOREN

Intuitiv bedienbar ist die bewährte und zuverlässige Steuerung für bürstenlose Motoren der weltweit führenden Curtiss-Wright Corporation. Sie reagiert präzise auf Ihre Befehle und behält zudem den Überblick über die verbleibende Akku-Laufzeit.



HOCHEFFIZIENTE BÜRSTENLOSE 250 WATT MOTOREN

Geliefert von Linix (einem weltweit führenden Motorenhersteller), bieten diese Hochleistungsmotoren die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie im Alltag brauchen (einschliesslich der Überwindung von Hindernissen von bis zu 40 mm). Hochgradig optimiert, erzielen sie die bestmögliche Reichweite aus Ihren Akkus.

STYLE

DER LETZTE SCHLIFF.

Mit seinem eleganten Carbonrahmen ist der Q50 R Carbon ein echtes Aushängeschild. Warum sorgen Sie also nicht mit einer der 5 Akzentfarben für noch mehr Aufsehen?



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um zum Online-Farbkonfigurator zu gelangen!



TECHNISCHE DATEN

Gesamtabmessungen (L x B x H)	923 mm x 570 mm x 928 mm
Abmessungen im gefalteten Zustand (L x B x H)	370 mm x 570 mm x 767 mm
Sitztiefe	420 mm
Sitzbreite	440 mm
Rückenhöhe	464 mm
Kantensteigfähigkeit max.	40 mm
Reichweite max. (ISO 7176-4)	12 km (24 km mit optionalem Zusatzakku)
Gewicht (ohne Akku)	14,5 kg
Gewicht eines Akkus	1,4 kg
Max. Zuladung	136 kg
Antriebsräder	8"
Lenkräder	6,5"
Steigfähigkeit max.	6°
Wendekreis	1600 mm
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Akku	24 V, 10 Ah Lithium-Ion
Steuerung	nVR2 (Curtiss-Wright), für bürstenlose Motoren
Motoren	2 x 250 Watt Hochleistungsmotoren
Transport ohne Nutzer	Befestigen Sie den Rollstuhl sorgfältig im Fahrzeug oder Flugzeug
Bestimmungsgemäße Verwendung	Für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Innen- und Aussennutzung

Sunrise Medical ist um Ihre Sicherheit besorgt. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung für sichere Betriebsanweisungen und Wartungsrichtlinien.

Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellblatt. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical. Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.SunriseMedical.ch zur Verfügung.

